


Einrichtung der VET Schnittstelle und Formfernrandung mit Optovision

Der VET-Client von Optovision muss an jedem Arbeitsplatz, auf dem WOpticus läuft und wo die Schnittstelle genutzt werden soll, installiert werden.

Im WOpticus Manager, Grundkonfiguration im Register Einstellungen die WOpticus.INI aufrufen.

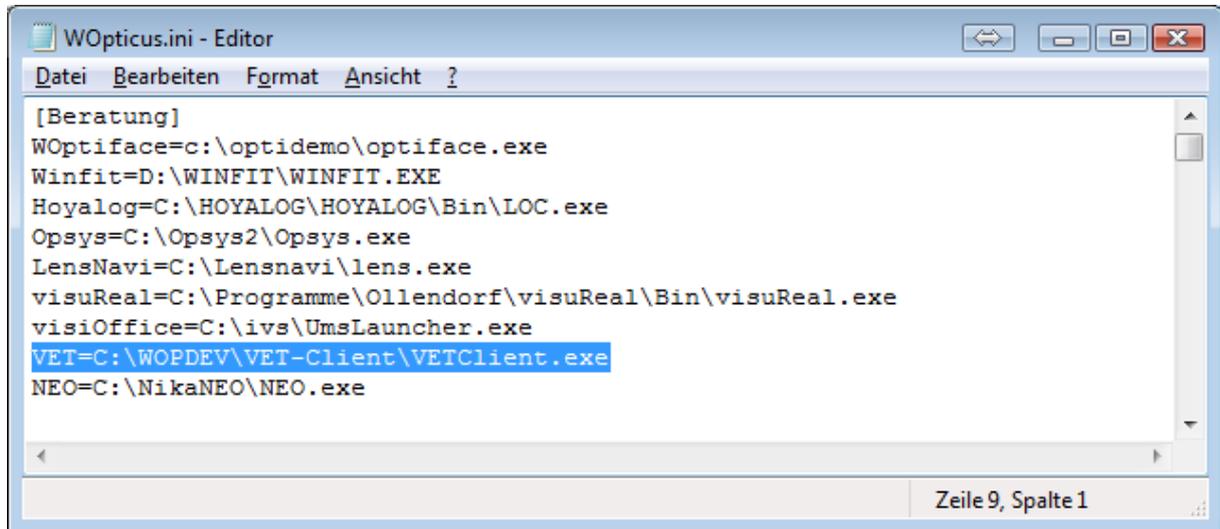


```
WOpticus.ini - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
[Beratung]
WOptiface=c:\optidemo\optiface.exe
Winfit=D:\WINFIT\WINFIT.EXE
Hoyalog=C:\HOYALOG\HOYALOG\Bin\LOC.exe
Opsys=C:\Opsys2\Opsys.exe
LensNavi=C:\Lensnavi\lens.exe
visuReal=C:\Programme\Ollendorf\visuReal\Bin\visuReal.exe
visiOffice=C:\ivs\UmsLauncher.exe
VET=C:\WOPDEV\VET-Client\VETClient.exe
NEO=C:\NikaNEO\NEO.exe
Zeile 9, Spalte 1
```

In der WOpticus.INI muss im Abschnitt Beratung folgender Eintrag gemacht werden:

```
VET=C:\VET-Client\VETClient.exe
```

Im VET-Client Verzeichnis befindet sich die VETCLIENT.INI die mit dem Editor geöffnet werden kann. Dort können die Angaben über den Import- und Exportpfad gemacht werden.

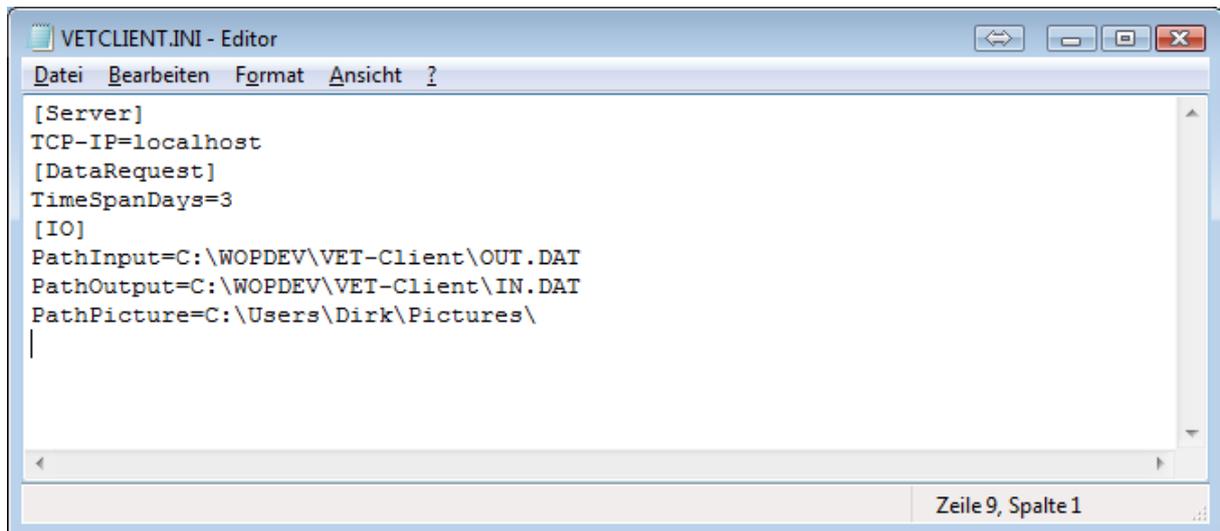


```
VETCLIENT.INI - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
[Server]
TCP-IP=localhost
[DataRequest]
TimeSpanDays=3
[IO]
PathInput=C:\WOPDEV\VET-Client\OUT.DAT
PathOutput=C:\WOPDEV\VET-Client\IN.DAT
PathPicture=C:\Users\Dirk\Pictures\
|
Zeile 9, Spalte 1
```


Die Bilder können nur dann übernommen werden wenn der VET die Bilder in ein Standard bmp, jpg oder tiff Format speichert. Optovision konnte dazu noch keine Angaben machen und das eingestellte png Format kann vom WOpticus leider nicht angezeigt werden.

Wenn das Bildformat stimmt kann in der INI im Abschnitt [IO] noch der Eintrag „PathPicture=Pfad der Bilder“ gemacht werden damit WOpticus automatisch das Bild importieren kann.


Sobald der Eintrag im Beratungsabschnitt gemacht ist und WOpticus neu gestartet wurde kann im Auftrag über das Hauptmenü Beratung VET aufgerufen werden.

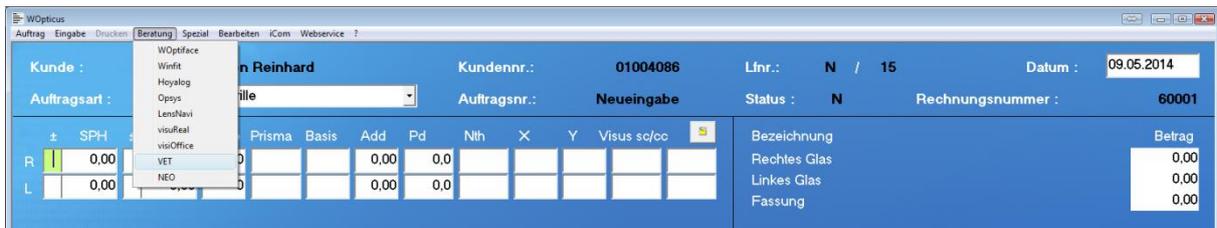

Der VET-Client erscheint und es kann ausgewählt werden was gemacht werden soll.

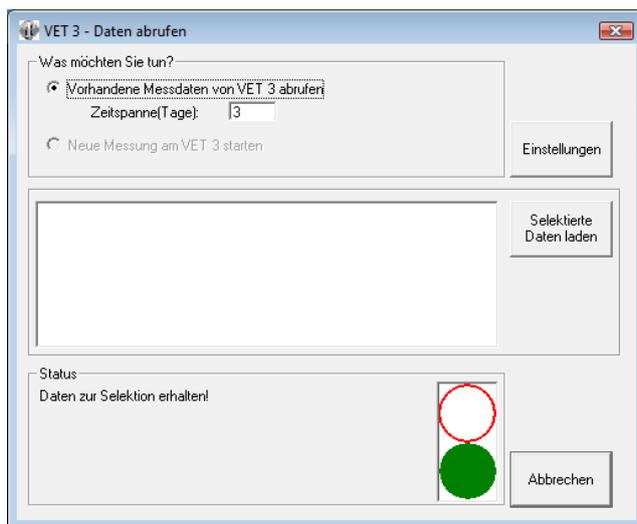

Wählen Sie eine vorhandene Messung aus und im WOpticus wird der Zentrier-Import-Dialog aufgerufen. Hier kann ausgewählt werden welche Daten in den aktuellen Auftrag übernommen werden sollen.

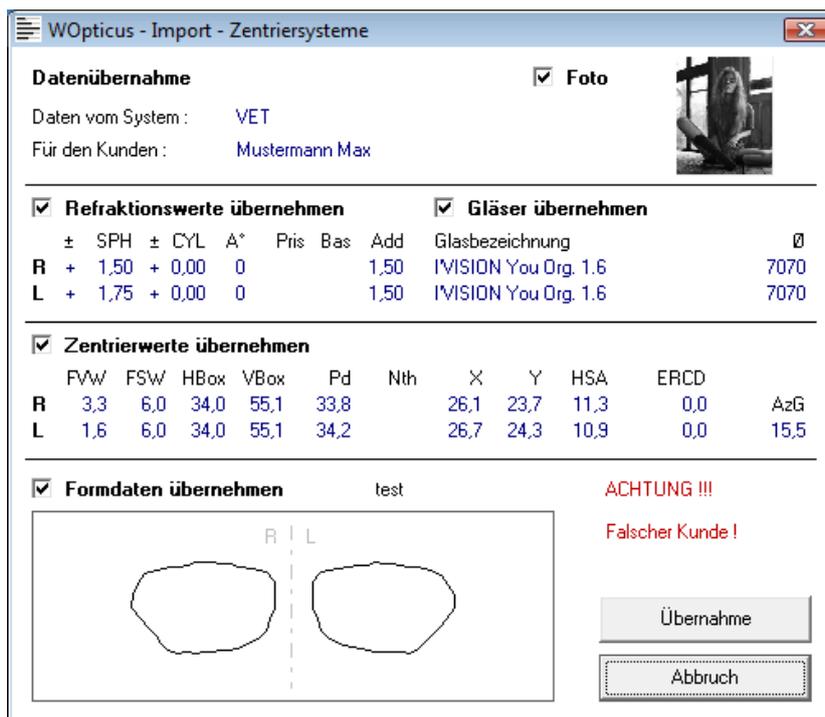

Formfernrandung

In Verbindung mit dem Multitracermodul ist auch Formfernrandung mit Optovision möglich. Dazu müssen beim Glaslieferanten neue Einstellungen für das Übertragen der Daten gemacht werden. Mit dem vorher eingestellten MDM5-Format lassen sich mit WOpticus keine Formdaten übertragen.

Hier können Sie Ihre Glaspreislisten bearbeiten, neue Glaspreislisten anlegen und die Reihenfolge der angezeigten Preislisten festlegen. Bitte beachten Sie, dass Sie keinen neuen Listennamen wählen, bei dem die ersten drei Buchstaben, mit einer schon vorhandenen Liste übereinstimmen.

Auflistung der im WOpticus installierten Glaspreislisten

Nr	Listenname	Bonus	Prozent	Kundennummer
4	Zeiss	0,00	0,00	502645
5	Shamir	0,00	0,00	
6	Sola	0,00	0,00	502645
7	Schulz	0,00	0,00	800
8	Hoya	47,00	3,00	
9	Galaxa	0,00	0,00	60000
10	Visall	0,00	0,00	
11	TOE	0,00	0,00	
12	Wetzlich	0,00	0,00	
13	Jaikudo	0,00	0,00	
14	Optovision	0,00	0,00	999985
18	Ophthalmica	0,00	0,00	
19	Nordhorn	0,00	0,00	
23	ReizeOptik CH	0,00	0,00	
34	Stratemeyer	0,00	0,00	123456789
35	IGAOptic	0,00	0,00	8001
36	BOW	0,00	0,00	D123456
37	Rupp	0,00	0,00	290135
40	Nika	0,00	0,00	11112
48	Seiko	50,00	0,00	
49	UNIOPT	0,00	0,00	
56	Essilor	0,00	0,00	012021

Listen-Nummer : 14 verbergen Stand : V6 01.01.2014

Listenname : Optovision Herstellerkürzel : OPT

Bestellen bei Lieferant : DFÜ-Rabatt % : 0,00

Empfänger ID : Bonus % : 0,00

Kundennummer : 123456 Passwort : xxxxxx

Schnittstellenformat : XML-MAIL Versicher. : Nein

VK-Preistyp : 20 empf.VK Result :

E-Mail für Bestellung : xmlorder@optovision.de

Export Pfad : C:\WinOnli\DFUE\

Export Datei : B2B.XML

Export Anwendung : C:\WinOnli\WINONLI.EXE

Export Parameter : IMPORT OPTO

Export Konfiguration : Ansprechpartner/Kontakt : Frau Plutta, Gabi

Bestell Fax Nr. : +49 (0)6103 757-240

Bestell Tel. Nr. :

Glasbestellung über : Weitere Optionen :
 Fax/Mail/XML/Exp. Kundenamen als Kommission verwenden
 DFÜ - Bestellung nicht Online aktualisieren (eigene Glaspreisliste)

Neue Glaspreisliste Neusortierung Aktualisieren Löschen Speichern Zurück

Geben Sie Kundennummer und Passwort ein wie es Ihnen von Optovision mitgeteilt wurde.

Als Schnittstellenformat muss XML-MAIL ausgewählt werden.

Email für die Glasbestellung ist: xmlorder@optovision.de

Die weiteren Angaben zum Export sind nur für die Schnittstelle zu WinOnline notwendig.

Hier muss der Name der Importdatei geändert werden nach: B2B.XML

WICHTIG! Im WinOnline müssen unter Einstellungen Anwenderdaten die Angaben zur Schnittstelle ebenfalls angepasst werden.